

Allgemeine Merkmale

Neue Serie von Einheiten für geschützte Tiere aus Edelstahl AISI 304.

Modell UA – Typ I zwei Konfigurationen verfügbar:

- ✓ EIN EINZIGES ABTEIL mit DREI Inneneinlegeböden und VIER TÜREN.
- ✓ VIER EINZELNE ABTEILE mit ACHT TÜREN.

Modell UA-Typ 3 – eine Konfiguration verfügbar:

- ✓ DREI EINZELNE FACHE mit SECHS TÜREN.

Bei allen Modellen besteht die Möglichkeit, die Kapazität der Käfige durch Hinzufügen von ZUSATZ-Einheiten zu verdoppeln, wobei die Filterung der HAUPT-Einheit genutzt wird.

Die Einheiten sind mit 4 Rollen ausgestattet, von denen zwei mit einer Bremse versehen sind, um die Mobilität zu gewährleisten und den Transport dieser Einheiten zur Reinigung in einen anderen Bereich als den Lagerbereich zu ermöglichen.

Die UA-Einheiten können betrieben werden:

- ✓ Unter **ÜBERDRUCK** zum Schutz der Tiere, z. B. immunsupprimierte Tiere, SPF-Tiere usw.
- ✓ Im **UNTERDRUCK**, was den Schutz der Umgebung und des Laborpersonals ermöglicht, z. B. bei infizierten Tieren in Labortests.



Modell UA – Typ I
UAIN-I + LICHTZYKLEN + HEIZUNG




Modell UA – Typ 3
UAIN-3 + KOHLE

Technische Daten


- Hochleistungsfähiger und sehr leiser Luftzufuhrmotor. Versorgungskapazität für zwei Speichereinheiten (HAUPT- UND SEKUNDÄR).
- Einstellbarer Differenzdruck zwischen 1 und 10 mm H₂O. Der Druck ist über ein Manometer überwachbar.
- Vom Benutzer einstellbare Luftwechselrate zwischen 100 und 500 pro Stunde.
- Der SPEICHERBEREICH ist aus Edelstahl AISI 304 gefertigt. Der FILTERBEREICH ist aus epoxidbeschichtetem Stahl gefertigt.
- Transparente, ohne Werkzeug abnehmbare Türen für eine einfache Reinigung.
- ULPA/HEPA-Filter mit einer Effizienz von 99,9995 % zur Sterilisierung der Abluft, die von den Tieren stammt (UNTERDRUCK), oder zur Sterilisierung der den Tieren zugeführten Luft (ÜBERDRUCK).
- Autonomes Alarmsystem für Motorausfälle und/oder Stromausfälle mit der Möglichkeit einer Fernverbindung (OPTIONAL).
- System zur Desodorierung der Abluft mittels Aktivkohlefilterpatrone (OPTIONAL).
- Ausgestattet mit Beleuchtung mit Lichtzyklen und dunklen Türen. (OPTIONAL)
- Heizsystem für die gesamte Einheit. (OPTIONAL)



Abmessungen und Fassungsvermögen

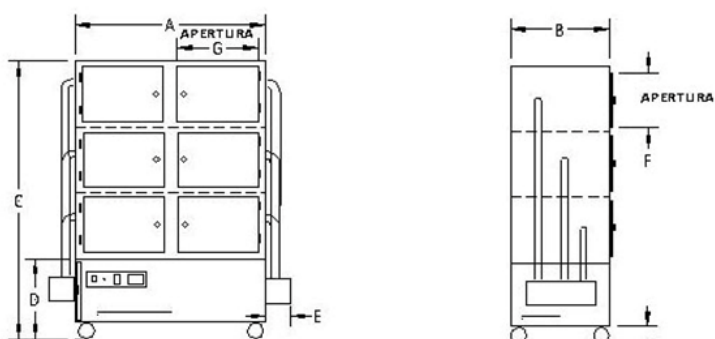

MODELOS UAI(N/P) -3

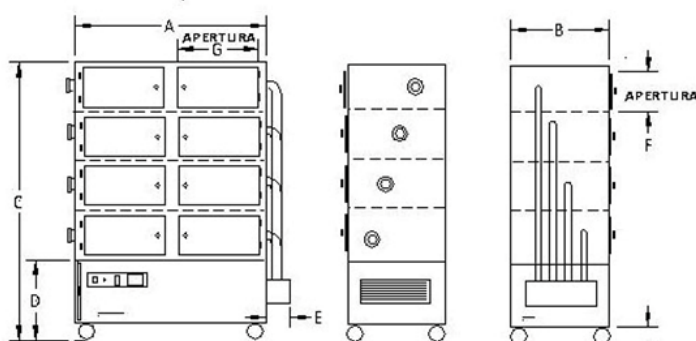

MODELOS UAI(N/P) -I

CODE/mm	A	B	C	D	E	F	G	H	GEWICH T
00-UA xx -I AC	1110	575	1835	540	165	540	345	110	188 kg
00-UAI xx -I AC	1110	575	1835	540	165	250	345	110	195 kg
00-UAI xx -3	1310	750	1890	540	165	380	555	110	205 kg

CODE/Käfige	Typ I	Typ II	Typ II L	Typ III	Typ IV
00-UA xx -I AC	48	32	24	16	---
00-UAI xx -I AC	48	32	24	16	---
00-UAI xx -3	63	36	27	18	6

Informationen zu Bestellungen

Code	Beschreibung	Außenmaße Breite x Tiefe x Höhe
00-UAP-I AC	TIERSCHUTZKABINE AUS EDELSTAHL, 1 ABTEIL, 4 TÜREN, ÜBERDRUCK	1430 x 575 x 1835 mm
00-UAN-I AC	TIERSCHUTZANLAGE AUS EDELSTAHL, 1 ABTEIL, 4 TÜREN, UNTERDRUCK	1430 x 575 x 1835 mm
00-UAIP-I AC	TIERSCHUTZANLAGE AUS EDELSTAHL, 4 EINZELNE ABTEILE, 8 TÜREN, ÜBERDRUCK	1430 x 575 x 1835 mm
00-UAIN-I AC	TIERSCHUTZANLAGE AUS EDELSTAHL, 4 EINZELABTEILE, 8 TÜREN, UNTERDRUCK	1430 x 575 x 1835 mm
00-UAIP-3	TIERSCHUTZANLAGE AUS EDELSTAHL, 3 EINZELABTEILE, 6 TÜREN, ÜBERDRUCK	1640 x 750 x 1890 mm
00-UAIN-3	TIERSCHUTZANLAGE AUS EDELSTAHL, 3 EINZELABTEILE, 6 TÜREN, UNTERDRUCK	1640 x 750 x 1890 mm
00-UAS-I AC	ZUSATZEINHEIT FÜR UAP/N-I EDELSTAHL MIT HALTERUNG	
00-UAIS-3 AC	ZUSATZEINHEIT FÜR UAIP/N-3 EDELSTAHL MIT HALTERUNG	
Code	Beschreibung Optionen	
51-MANOCAB	DWYER MINIHELIC MANOMETER	
00-UALAR	AUTONOMES FEHLERALARMSYSTEM (NUR EIN TIERHAUS)	
00-UACAR+ AC	AKTIVKOHLE (1 STÜCK) FÜR UA-I ÜBERDRUCK. AC. EDELSTAHL	
00-UACAR-	AKTIVKOHLE (1 STÜCK) FÜR UA-I UND 3 NEGATIVDRUCK	
00-UAICAR+ AC	AKTIVKOHLE (4 UND 3 STÜCK) FÜR UAI-I UND 3. ÜBERDRUCK. AC. EDELSTAHL	
00-UAICAR-	AKTIVKOHLE (4 UND 3 KOMPONENTEN) FÜR UAI-I UND 3. UNTERDRUCK	
00-UACAL	HEIZSYSTEM FÜR UA	
00-UALUZ-ITI	GEMEINSAME BELEUCHTUNGSZYKLEN (1) MIT TÜREN (8) DUNKEL FÜR INDIVIDUELLEN TIERSTALL, MODELL ITI FÜR UA-I	
00-UALUZ-ITI 3	GEMEINSAME BELEUCHTUNGSZYKLEN (1) MIT TÜREN (6) DUNKEL FÜR EINZELNEN TIERRAUM, MODELL ITI FÜR UA-3	
Code	Beschreibung Ersatzteile	
52-UA112	SPEZIELLER RUNDER VORFILTER 11 CM (STÜCK)	
60-PREFI5236	VORFILTER FÜR TIERHALTUNG UA -I 360X520 MM (STÜCK)	
60-UA120	VORFILTER FÜR TIERHALTUNG UA - II UND 3 350 X 700 MM (STÜCK)	
60-H303069	HEPA-FILTER 305 X 305 X 69 MM (STÜCK)	
60-H306169	HEPA-FILTER 305 X 610 X 69 MM (STÜCK)	