

## Características

La estación TDI EUROAIRE de Dispensación de Formaldehido es una cabina de trabajo compacta diseñada para almacenamiento, contención y dispensación de Químicos, en particular Formaldehido, en Quirófanos o Laboratorios de Patología.

Diseñada para ser personalizada en dimensiones y dotación para cada tipo de requerimiento.



Diseñada para dar protección total al operario.



## PRINCIPIO DE TRABAJO DE LA ESTACION

- La ESTACION – FORM está diseñada entorno a nuestras Vitrinas de extracción de gases FAGV, asegurando al usuario la máxima protección.
- Por su diseño facilita el total acceso a la zona de trabajo.
- Dotada de motores de alto rendimiento y velocidad regulable.
- Filtro de carbón activado (hasta 10 Kg) específico para FORMALDEHIDO de gran capacidad de retención.
- El contenedor químico original del cliente (hasta 25L) se coloca en el estante inferior y se conecta a un sistema de bombeo que, por presión de un botón interruptor o un pedal, bombea formaldehido hacia el grifo del área de trabajo.

# ESTACIÓN DE DISPENSACIÓN DE FORMALDEHIDO

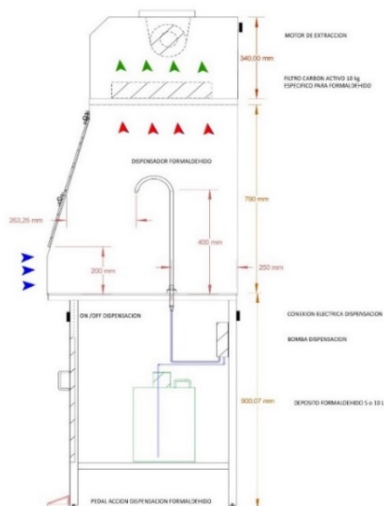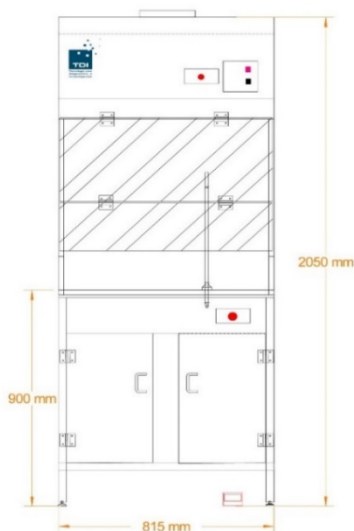

## Especificaciones Técnicas

MODELO	00-ESTACION-FORM
Dimensiones Interiores	790 X 800 X 715 (mm) (altura x ancho x fondo)
Dimensiones exteriores	1050 X 815 X 730 (mm) (altura x ancho x fondo)
Altura Superficie Trabajo	900 mm
Apertura Máxima dos pasos	400 mm y 770 mm
Velocidad de Barrera	0,3 ---- 0,8 m/s
Nivel Sonoro	</= 60 dB
Tubo Salida	PVC longitud máxima 4 metros
Diámetro tubo salida OPCIONAL	250 mm
Peso total (kg)	180
Material	Exterior de láminas de acero pintado epoxy. Superficie Acero Inoxidable AISI 304
Sistema de control	Regulador de velocidad de aspiracion
Filtro	CARBON ACTIVADO PARA FORMALDEHIDO
Iluminación	LED
Consumo	400 W
Potencia	220 v, 50 h z ± 10% ; 110 v , 60 Hz) Protección IP44
Bombeo formaldehido	Bomba para formalina con caudal max 1,3l/hora. regulable
Deposito formaldehido	Capacidad hasta 25 litros. Incluye tapón con válvula aireadora.
Acción de Bombeo	Incluye Pedal para accionar el bombeo.

## Referencias para Pedidos

Código	Descripción
00-ESTACION-FORM	Estación para la Dispensación de Formaldehido Modelo EST-FOR 800

"Toda información, características, dimensiones y datos eléctricos mostrados en los documentos comerciales y hojas de datos de TDI son orientativos y no contractuales; por tanto, está sujeta a cambios según las necesidades de cada cliente y siempre que la normativa aplicable así lo permita."