

Merkmale

Die Formaldehyd-Abgabestation TDI EUROAIRE ist eine kompakte Arbeitskabinen, die für die Lagerung, Aufbewahrung und Abgabe von Chemikalien, insbesondere Formaldehyd, in Operationssälen oder pathologischen Labors konzipiert ist.



Sie lässt sich in Abmessungen und Ausstattung an jede Anforderung anpassen.

Sie wurde entwickelt, um dem Bediener umfassenden Schutz zu bieten.



FUNKTIONSWEISE DER STATION

- Die STATION – FORM basiert auf unseren FAGV-Gasabsaugvitrienen und gewährleistet dem Benutzer maximalen Schutz.
- Dank ihrer Konstruktion ermöglicht sie uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsbereich.
- Ausgestattet mit leistungsstarken Motoren und regelbarer Drehzahl.
- Aktivkohlefilter (bis zu 10 kg) speziell für FORMALDEHYD mit hoher Rückhaltekapazität.
- Der Original-Chemikalienbehälter des Kunden (bis zu 25 l) wird auf das untere Regal gestellt und an ein Pumpsystem angeschlossen, das per Knopfdruck oder Fußpedal Formaldehyd zum Hahn im Arbeitsbereich pumpt.

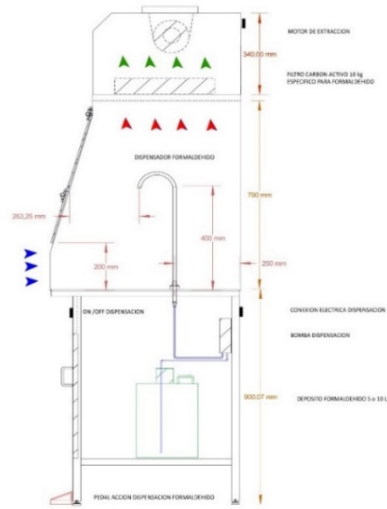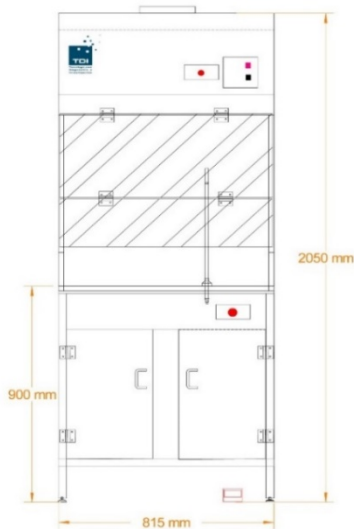

Technische Daten

MODELL	00-STATION-FORM
Innenmaße	790 x 800 x 715 (mm) (Höhe x Breite x Tiefe)
Außenmaße	1050 x 815 x 730 (mm) (Höhe x Breite x Tiefe)
Höhe der Arbeitsfläche	900 mm
Maximale Öffnung bei zwei Durchgängen	400 mm und 770 mm
Barrieregeschwindigkeit	0,3 ---- 0,8 m/s
Geräuschpegel	</= 60 dB
Auslaufrohr	PVC, maximale Länge 4 Meter
Durchmesser des Auslassrohrs OPTIONAL	250 mm
Gesamtgewicht (kg)	180
Material	Außen aus epoxidbeschichteten Stahlblechen. Oberfläche: Edelstahl AISI 304
Steuerungssystem	Regler für die Ansauggeschwindigkeit
Filter	AKTIVKOHLEFILTER FÜR FORMALDEHYD
Beleuchtung	LED
Leistungsaufnahme	400 W
Leistung	220 V, 50 Hz ± 10 %; 110 V, 60 Hz) Schutzart IP44
Formaldehyd-Pumpen	Formalinpumpe mit einer maximalen Förderleistung von 1,3 l/Stunde, regelbar
Formaldehydbehälter	Fassungsvermögen bis zu 25 Liter. Inklusive Verschluss mit Belüftungsventil.
Pumpbetrieb	Inklusive Fußpedal zur Betätigung der Pumpe.

Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
00-ESTACION-FORM	Formaldehyd-Abgabestation Modell EST-FOR 800

„Alle Informationen, Eigenschaften, Abmessungen und elektrischen Daten, die in den Verkaufsunterlagen und Datenblättern von TDI aufgeführt sind, dienen lediglich der Orientierung und sind nicht vertraglich bindend; sie können daher je nach den Bedürfnissen des jeweiligen Kunden und sofern die geltenden Vorschriften dies zulassen, Änderungen unterliegen.“