

Características


- El modelo móvil **PURCLINIC**, es un equipo de uso versátil y portátil, su finalidad es llegar de manera directa a zonas de acceso limitado o lugares pequeños.
- De uso frecuente en laboratorios de investigación aplicado a la medicina, instrumentos de precisión, estudios de microbiología, biofarmacia entre otros.
- Una de sus características principales es la adaptabilidad a distintos espacios gracias a su movilidad, dándole total independencia al trabajo.
- Fácil instalación y uso.
- Construido en acero electrolgalvanizado con recubrimiento antimicrobiano minimizando los efectos de corrosión y humedad.
- La aspiración en presión negativa es realizada a través de su boquilla en acrílico adaptable y regulable a distintas posiciones.
- El brazo de extracción de aleación de aluminio presta rigidez en las distancias y movimiento gracias a sus ángulos.
- Su parte frontal y trasera cuenta con salidas de aire, haciendo que su expulsión sea uniforme.
- Para su movilidad cuenta con 4 ruedas, 2 de ellas con función de bloqueo para fijar el equipo.

Equipo de Purificación de Aire en zonas específicas de difícil acceso, proporcionando un ambiente de alta pureza.



- Su sistema de purificación consiste en el uso de un filtro de alta eficiencia y filtro de carbón activado.
- Su filtro HEPA asegura eficiencia de filtración al 99,995% en 0,3um.
- Ruedas de alta resistencia para una movilidad conveniente.

- Pantalla táctil LCD para monitorización en tiempo real de:
 - La concentración de compuestos orgánicos volátiles – VOC.
 - Temperatura,
 - Humedad,
 - Velocidad del aire.
- Se puede configurar alarmas a demanda del usuario.

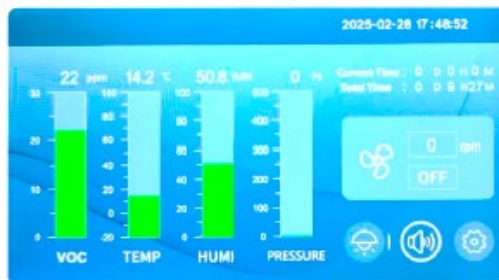

Pantalla Táctil LCD

Características Técnicas

MODELO	PURCLINIC
Dimensiones exteriores	460 x 460 x 700 mm
Diámetro interno de la conexión al conducto de escape	90 mm
Filtro principal	Filtro absoluto HEPA con una eficacia del 99,995% mpps según normativa EN 1822
Flujo de aire	0,3-0,6 m/s
Nivel sonoro	≤ 50 dB
Consumo	30 W
Fuente de alimentación	AC 220 V, 50 HZ± 10%
Motor	PSC, 24V
Dimensiones empaque	650 x 750 x 950 mm
Peso	67 kg
Accesorios opcionales	Filtro de carbón activo; Filtro de gases orgánicos; Filtro de gases ácidos

Información Pedidos

CODIGO	DESCRIPCION
440206-PURCLINIC	BRAZO EXTRACTOR DE GASES MOVIL MODELO PURCLINIC