

Caractéristiques

Les cages sont fabriquées à partir de matériaux plastiques qui offrent les conditions idéales pour l'élevage d'animaux de laboratoire.

De nombreuses années d'expérience dans le développement et la production, associées aux matériaux utilisés, ainsi qu'à la conception et à la manipulation, font de ces cages des éléments indispensables à l'élevage moderne d'animaux de laboratoire.

Les matériaux synthétiques évoluant parallèlement à d'autres, des matériaux présentant une meilleure résistance à la chaleur ainsi qu'une plus grande résistance physique et chimique ont été ajoutés.


- Polysulfone/PSU, stérilisable à la vapeur jusqu'à 134 °C.
- Polyéthylamide/PEI, stérilisable à la vapeur jusqu'à 143 °C.
- Polyphénylsulfone/PPSU, stérilisable à la vapeur jusqu'à 143 °C.



Capacité maximale d'animaux par cage conformément à la directive européenne 2010/363/UE, en fonction au type de cage, à la surface et au poids de l'animal.

Type de cage	I L	II	II L	HRC 500	III	III H	IV
Surface au sol	405 cm ²	360 cm ²	530 cm ²	502 cm ²	830 cm ²	800 cm ²	1 815 cm ²
Dimensions	362 x 160 x 143	265 x 205 x 140	365 x 205 x 140	408 x 185 x 120	425 x 265 x 150	425 x 265 x 180	590 x 380 x 200
Hauteur	13 cm	14 cm	14 cm	12 cm	15 cm	18 cm	20 cm
Souris							
jusqu'à 20 g	7	6	8	8	13	13	30
20 – 25 g	6	5	7	7	11	11	26
25 – 30 g	5	4	6	6	10	10	22
plus de 30 g	4	3	5	5	8	8	18
Hamster							
jusqu'à 60 g	-	-	-	-	5	5	12
60 – 100 g	-	-	-	-	4	4	9
plus de 100 g	-	-	-	-	3	3	7
Rats							
jusqu'à 200 g	-	-	-	-	-	4	9
200 – 300 g	-	-	-	-	-	3	7
300 – 400 g	-	-	-	-	-	2	5
400 – 600 g	-	-	-	-	-	1	4
plus de 600 g	-	-	-	-	-	1	3
Cochon d'Inde (Cages avec grille extra haute de 50 mm).							
jusqu'à 200 g	-	-	-	-	-	-	9
200 – 300 g	-	-	-	-	-	-	5
300 – 450 g	-	-	-	-	-	-	4

Cages

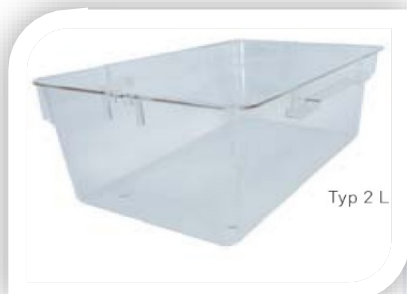


Grilles

Les grilles destinées à recouvrir les cages sont fabriquées à partir de barres en acier inoxydable 1.4301 / AISI 304, puis polies par électrolyse. Le type et la conception de la zone d'alimentation sont innovants. Le cadre extérieur en fil métallique de la grille offre une excellente stabilité latérale lorsque la cage est ouverte, et le retrait de la grille vers l'arrière facilite grandement sa manipulation. L'écartement entre les fils de la grille est de 7 mm.

Les grilles en acier inoxydable sont disponibles avec un Swing **Clip** (pince de verrouillage) ou un Frame **Clamp** (pince de fixation) ; pour une utilisation comme couvercle interne, ou pour une utilisation dans des cages avec couvercle à filtre.

En option, les zones d'alimentation peuvent être équipées d'un séparateur amovible ou d'un séparateur à charnières intégré.

Grilles à clip et à pince

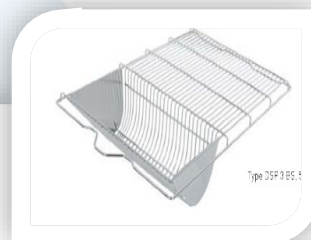

Grilles pour couvercles de filtre



Références de commande

CODE	DESCRIPTION
CAGES	
362-CIL-JAPC	CAGE DE TYPE I L 362 x 160 x 143 mm (SURFACE : 405 cm ²) POLYCARBONATE (SOURIS)
362-CIL-JAPSU	CAGE DE TYPE I L 362 x 160 x 143 mm (SURFACE : 405 cm ²) POLYSULFONE (SOURIS)
362-CII-JAPC	CAGE DE TYPE II 265 x 205 x 140 mm (SURFACE : 360 cm ²) POLYCARBONATE (SOURIS)
362-CII-JAPSU	CAGE DE TYPE II 265 x 205 x 140 mm (SURFACE : 360 cm ²) POLYSULFONE (SOURIS)
362-CIIL-JAPC	CAGE DE TYPE IIL 365 x 205 x 140 mm (SURFACE : 530 cm ²) POLYCARBONATE (SOURIS)
362-CIIL-JAPSU	CAGE DE TYPE IIL 365 x 205 x 140 mm (SURFACE : 530 cm ²) POLYSULFONE (SOURIS)
362-C-HRC500-JAPC	CAGE DE TYPE HRC 500 408 x 185 x 120 mm (SURFACE : 502 cm ²) POLYCARBONATE (SOURIS)
362-C-HRC500-JAPSU	CAGE DE TYPE HRC 500 408 x 185 x 120 mm (SURFACE : 502 cm ²) POLYSULFONE (SOURIS)
362-CIII-JAPC	CAGE DE TYPE III 425 x 265 x 150 mm (SURFACE : 830 cm ²) POLYCARBONATE (SOURIS)
362-CIII-JAPSU	CAGE DE TYPE III 425 x 265 x 150 mm (SURFACE : 830 cm ²) POLYSULFONE (SOURIS)
362-CIII-HJAPC180	CAGE DE TYPE III H 425 x 265 x 180 mm (SURFACE : 800 cm ²) POLYCARBONATE (RONGEURS)
362-CIII-HJAPSU180	CAGE DE TYPE III H 425 x 265 x 180 mm (SURFACE : 800 cm ²) POLYSULFONE (RONGEURS)
362-CIV-JAPC	CAGE DE TYPE IV 590 x 380 x 200 mm (SURFACE : 1815 cm ²) POLYCARBONATE (RONGEURS)
362-CIV-JAPSU	CAGE DE TYPE IV 590 x 380 x 200 mm (SURFACE : 1825 cm ²) POLYSULFONE (RONGEURS)

Références pour les commandes

GRILLES POUR CAGES SANS COUVERCLE			
362-CIL-NTF-CLIP-ND	FERMETURE CLIP	GRILLE EN ACIER INOXYDABLE POUR CAGE DE TYPE II (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE « CLIP » MAILLE 7 MM SANS SÉPARATEUR	
362-CIL-NTF-CLIP-SD		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE, CAGE DE TYPE II (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE GRAV « CLIP », MAILLE DE 7 MM AVEC SÉPARATEUR	
362-CII-NTF-CLIP-ND		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE POUR CAGE DE TYPE II (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE GRAV « CLIP » GRILLE 7 MM SANS SÉPARATEUR	
362-CIIL-NTF-CLIP-ND		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE POUR CAGE DE TYPE IIL (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE GRAV « CLIP » GRILLE 7 MM SANS SÉPARATEUR	
362-CHRC500-NTF-CLIP-SD		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE, CAGE DE TYPE HRC500 (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE GRAV « CLIP » GRILLE 7 MM AVEC SÉPARATEUR	
362-CIII/IIIIH-NTF-CLIP-ND		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE DE TYPE III/IIIIH (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE GRAV « CLIP » GRILLE 7 MM SANS SÉPARATEUR	
362-CIII-NTF-CLIP-ND-50		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE POUR CAGE DE TYPE III (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE GRAV « CLIP » GRILLE +50 MM SANS SÉPARATEUR	
362-CIII-NTF-CLIP-SD-50		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE, CAGE DE TYPE III (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE GRAV « CLIP » GRILLE +50 MM AVEC SÉPARATEUR	
362-CIV-NTF-CLIP-ND		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE, CAGE DE TYPE IV (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE GRAV « CLIP » GRILLE 7 MM SANS SÉPARATEUR	
362-CIV-NTF-CLIP-ND-50		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE POUR CAGE DE TYPE IV (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE GRAV « CLIP » GRID +50 MM SANS SÉPARATEUR	
362-CIV-NTF-CLIP-ND-50C		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE, CAGE DE TYPE IV (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE GRAV « CLIP » GRILLE +50 MM SANS SÉPARATEUR (COBAYE)	
362-CIL-NTF-CLAM-ND		FERMETURE CLAMP	GRILLE EN ACIER INOXYDABLE POUR CAGE DE TYPE II (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE « FRAME CLAMP » GRID 7 MM SANS SÉPARATEUR
362-CIL-NTF-CLAM-SD			GRILLE EN ACIER INOXYDABLE, CAGE DE TYPE II (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE « FRAME CLAMP » GRILLE 7 MM AVEC SÉPARATEUR
362-CII-NTF-CLAM-ND	GRILLE EN ACIER INOXYDABLE POUR CAGE DE TYPE II (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE « FRAME CLAMP » GRILLE 7 MM SANS SÉPARATEUR		
362-CII-NTF-CLAM-SD	GRILLE EN ACIER INOXYDABLE CAGE DE TYPE II (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE « FRAME CLAMP » GRILLE 7 MM AVEC SÉPARATEUR		
362-CIIL-NTF-CLAM-ND	GRILLE EN ACIER INOXYDABLE POUR CAGE DE TYPE IIL (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE « FRAME CLAMP » GRILLE 7 MM SANS SÉPARATEUR		
362-CIII/IIIIH-NTF-CLAM-ND	GRILLE EN ACIER INOXYDABLE, CAGE DE TYPE III/IIIIH (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE « FRAME CLAMP », GRILLE 7 MM SANS SÉPARATEUR		
362-CIII-NTF-CLAM-ND-50	GRILLE EN ACIER INOXYDABLE POUR CAGE DE TYPE III (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE « FRAME CLAMP » GRILLE +50 MM SANS SÉPARATEUR		
362-CIV-NTF-CLAM-ND	GRILLE EN ACIER INOXYDABLE POUR CAGE DE TYPE IV (SANS COUVERCLE) AVEC FERMETURE « FRAME CLAMP » GRILLE 7 MM SANS SÉPARATEUR		
GRILLES POUR CAGE AVEC COUVERCLE			
362-CII-STF-CLAM-ND	FERMETURE CLAMP	GRILLE EN ACIER INOXYDABLE DE TYPE II (COUVERCLE/FILTRE) AVEC FERMETURE « FRAME CLAMP » SANS SÉPARATEUR	
362-CII-STF-CLAM-SD		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE DE TYPE II (COUVERCLE/FILTRE) AVEC FERMETURE « FRAME CLAMP » AVEC SÉPARATEUR	
362-CIIL-STF-NO-ND	SANS FERMETURE	GRILLE EN ACIER INOXYDABLE DE TYPE IIL (COUVERCLE / FILTRE) SANS FERMETURE ET SANS SÉPARATEUR	
362-CIIL-STF-NO-SD		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE, CAGE DE TYPE IIL (COUVERCLE / FILTRE) SANS FERMETURE AVEC SÉPARATEUR	
362-CIII/IIIIH-STF-NO-ND		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE DE TYPE III/IIIIH (COUVERCLE / FILTRE) SANS FERMETURE ET SANS SÉPARATEUR	
362-CIII/IIIIH-STF-NO-SD		GRILLE EN ACIER INOXYDABLE DE TYPE III/IIIIH (COUVERCLE / FILTRE) SANS FERMETURE AVEC SÉPARATEUR	