

Eigenschaften

Die Käfige bestehen aus Kunststoffmaterialien, die ideale Bedingungen für die Haltung von Labortieren bieten.

Langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Produktion in Verbindung mit den verwendeten Materialien sowie dem Design und der Handhabung machen die Käfige zu unverzichtbaren Bestandteilen der modernen Labortierhaltung.

Da sich die Kunststoffe auch gemeinsam mit anderen Materialien weiterentwickeln, wurden Materialien mit höherer Hitzebeständigkeit sowie größerer physikalischer und chemischer Beständigkeit hinzugefügt.




- Polysulfon/PSU, mit Dampf bis 134 °C sterilisierbar.
- Polyethylenimid/PEI, mit Dampf bis 143 °C sterilisierbar.
- Polyphenylsulfid/PPSU, mit Dampf bis 143 °C sterilisierbar.

Maximale Tierbelegung pro Käfig gemäß der Europäischen Richtlinie 2010/363/EU, abhängig nach Käfigtyp, Bodenfläche und Tiergewicht.

Käfigtyp	I L	II	II L	HRC 500	III	III H	IV
Bodenfläche	405 cm ²	360 cm ²	530 cm ²	502 cm ²	830 cm ²	800 cm ²	1.815 cm ²
Abmessungen	362 x 160 x 143	265 x 205 x 140	365 x 205 x 140	408 x 185 x 120	425 x 265 x 150	425 x 265 x 180	590 x 380 x 200
n Höhe	13 cm	14 cm	14 cm	12 cm	15 cm	18 cm	20 cm
Maus							
bis zu 20 g	7	6	8	8	13	13	30
20 – 25 g	6	5	7	7	11	11	26
25 – 30 g	5	4	6	6	10	10	22
mehr als 30 g	4	3	5	5	8	8	18
Hamster							
bis zu 60 g	-	-	-	-	5	5	12
60 – 100 g	-	-	-	-	4	4	9
mehr als 100 g	-	-	-	-	3	3	7
Ratten							
bis zu 200 g	-	-	-	-	-	4	9
200 – 300 g	-	-	-	-	-	3	7
300 – 400 g	-	-	-	-	-	2	5
400 – 600 g	-	-	-	-	-	1	4
mehr als 600 g	-	-	-	-	-	1	3
Meerschweinchen (Käfige mit extra hohem Gitter (50 mm)).							
bis zu 200 g	-	-	-	-	-	-	9
200 – 300 g	-	-	-	-	-	-	5
300 – 450 g	-	-	-	-	-	-	4

HERKÖMMLICHE KÄFIGE UND GITTER FÜR KLEINE NAGETIERE

Käfige

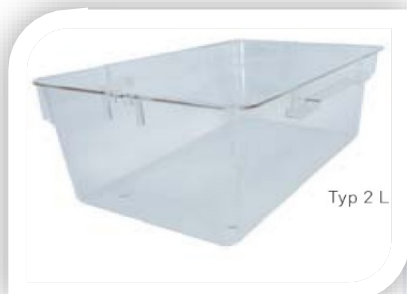


Gitter

Die Gitter zum Abdecken der Käfige werden aus Edelstahlstangen 1.4301 / AISI 304 gefertigt und anschließend elektrolytisch poliert. Die Art und das Design des Futterbereichs sind innovativ. Durch den äußeren Drahtrahmen der Abdeckung wird eine hervorragende seitliche Stabilität beim Öffnen des Käfigs gewährleistet, und das Zurückziehen des Gitters erleichtert dessen Handhabung erheblich. Der Abstand zwischen den Gitterstäben beträgt 7 mm.

Die Edelstahlgitter sind mit Swing **Clip** (Verriegelungsklemme) oder mit Frame **Clamp** (Rahmenklemme) erhältlich; zur Verwendung als Innendeckel oder für den Einsatz in Käfigen mit Filterdeckel.

Optional können die Futterbereiche mit einer herausnehmbaren Trennwand oder einer integrierten Klapptrennwand geliefert werden.

Clip- und Clamp- Gitter

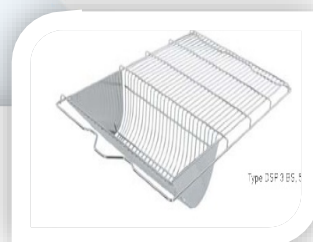

Gitter für Filterdeckel



Bestellnummern

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
KÄFIGE	
362-CIL-JAPC	KÄFIG TYP I L 362 x 160 x 143 mm (FLÄCHE: 405 cm ²) POLYCARBONAT (MÄUSE)
362-CIL-JAPSU	KÄFIG TYP I L 362 x 160 x 143 mm (FLÄCHE: 405 cm ²) POLYSULFON (MÄUSE)
362-CII-JAPC	Käfig Typ II 265 x 205 x 140 mm (Fläche: 360 cm ²) POLYCARBONAT (Mäuse)
362-CII-JAPSU	KÄFIG TYP II 265 x 205 x 140 mm (FLÄCHE: 360 cm ²) POLYSULFON (MÄUSE)
362-CIIL-JAPC	KÄFIG TYP IIL 365 x 205 x 140 mm (FLÄCHE: 530 cm ²) POLYCARBONAT (MÄUSE)
362-CIIL-JAPSU	KÄFIG TYP IIL 365 x 205 x 140 mm (FLÄCHE: 530 cm ²) POLYSULFON (MÄUSE)
362-C-HRC500-JAPC	Käfig Typ HRC 500 408 x 185 x 120 mm (Fläche: 502 cm ²) POLYCARBONAT (Mäuse)
362-C-HRC500-JAPSU	KÄFIG TYP HRC 500 408 x 185 x 120 mm (FLÄCHE: 502 cm ²) POLYSULFON (MÄUSE)
362-CIII-JAPC	Käfig Typ III 425 x 265 x 150 mm (Fläche: 830 cm ²) POLYCARBONAT (Mäuse)
362-CIII-JAPSU	KÄFIG TYP III 425 x 265 x 150 mm (FLÄCHE: 830 cm ²) POLYSULFON (MÄUSE)
362-CIII-HJAPC180	KÄFIG TYP III H 425 x 265 x 180 mm (FLÄCHE: 800 cm ²) POLYCARBONAT (NAGETIERE)
362-CIII-HJAPSU180	Käfig Typ III H 425 x 265 x 180 mm (Fläche: 800 cm ²) Polysulfon (Nagetiere)
362-CIV-JAPC	KÄFIG TYP IV 590 x 380 x 200 mm (FLÄCHE: 1815 cm ²) POLYCARBONAT (NAGETIERE)
362-CIV-JAPSU	KÄFIG TYP IV 590 x 380 x 200 mm (FLÄCHE: 1825 cm ²) POLYSULFON (NAGETIERE)

Bestellnummern

GITTER FÜR KÄFIGE OHNE DECKEL		
362-CIL-NTF-CLIP-ND	VERSCHL USS CLIP	GITTER A.INOX KÄFIG TYP II (OHNE DECKEL) MIT VERSCHLUSS „CLIP“ MASCHENWEITE 7 MM OHNE TRENNWAND
362-CIL-NTF-CLIP-SD		Edelstahlgitter, Käfig Typ II (ohne Deckel) mit „CLIP“-Verschluss, Gitter 7 mm mit Trennwand
362-CII-NTF-CLIP-ND		Edelstahlgitter Käfig Typ II (ohne Deckel) mit GRAV-„CLIP“-Verschluss, 7-mm-Gitter, ohne Trennwand
362-CIIL-NTF-CLIP-ND		Edelstahlgitter Käfig Typ III (ohne Deckel) mit GRAV-„CLIP“-Verschluss, 7-mm-Gitter ohne Trennwand
362-CHRC500-NTF-CLIP-SD		Edelstahlgitterkäfig Typ HRC500 (ohne Deckel) mit GRAV-„CLIP“-Verschluss, Gitter 7 mm, mit Trennwand
362-CIII/IIIIH-NTF-CLIP-ND		Edelstahlgitter Käfig Typ III/IIIIH (ohne Deckel) mit GRAV-„CLIP“-Verschluss, Gitter 7 mm, ohne Trennwand
362-CIII-NTF-CLIP-ND-50		Edelstahlgitter Käfig Typ III (ohne Deckel) mit GRAV-„CLIP“-Verschluss Gitter +50 mm ohne Trennwand
362-CIII-NTF-CLIP-SD-50		Edelstahlgitter Käfig Typ III (ohne Deckel) mit GRAV-„CLIP“-Verschluss, Gitter +50 mm mit Trennwand
362-CIV-NTF-CLIP-ND		Edelstahlgitter Käfig Typ IV (ohne Deckel) mit GRAV-„CLIP“-Verschluss, Gitter 7 mm, ohne Trennwand
362-CIV-NTF-CLIP-ND-50		Edelstahlgitterkäfig Typ IV (ohne Deckel) mit GRAV-„CLIP“-Verschluss, Gitter +50 mm, ohne Trennwand
362-CIV-NTF-CLIP-ND-50C		Edelstahlgitter Käfig Typ IV (ohne Deckel) mit GRAV-„CLIP“-Verschluss, Gitter +50 mm, ohne Trennwand (Meerschweinchen)
362-CIL-NTF-CLAM-ND	CLAMP- VERSCHL USS	Edelstahlgitter Käfig Typ II (ohne Deckel) mit „FRAME CLAMP“-Verschluss, Gitter 7 mm, ohne Trennwand
362-CIL-NTF-CLAM-SD		Edelstahlgitter II-Käfig (ohne Deckel) mit „Frame Clamp“-Verschluss, Gitter 7 mm, mit Trennwand
362-CII-NTF-CLAM-ND		Edelstahlgitter Käfig Typ II (ohne Deckel) mit „Frame Clamp“-Verschluss, Gitterweite 7 mm, ohne Trennwand
362-CII-NTF-CLAM-SD		Edelstahlgitter Käfig Typ II (ohne Deckel) mit „Frame Clamp“-Verschluss, 7-mm-Gitter mit Trennwand
362-CIIL-NTF-CLAM-ND		Edelstahlgitter Käfig Typ III (ohne Deckel) mit „Frame Clamp“-Verschluss, 7-mm-Gitter ohne Trennwand
362-CIII/IIIIH-NTF-CLAM-ND		Edelstahlgitterkäfig Typ III/IIIIH (ohne Deckel) mit „Frame Clamp“-Verschluss, 7-mm-Gitter ohne Trennwand
362-CIII-NTF-CLAM-ND-50		EDELSTAHLGITTER KÄFIG TYP III (OHNE DECKEL) MIT „FRAME CLAMP“-VERSCHLUSS, MASCHENWEITE 50 MM, OHNE TRENNWAND
362-CIV-NTF-CLAM-ND		Edelstahlgitter für Käfig Typ IV (ohne Deckel) mit „Frame Clamp“-Verschluss, Gitterweite 7 mm, ohne Trennwand
GITTER FÜR KÄFIGE MIT DECKEL		
362-CII-STF-CLAM-ND	CLAMP- VERSCHL USS	Edelstahlgitter, Käfig Typ II (Deckel/Filter) mit „Frame Clamp“-Verschluss, ohne Trennwand
362-CII-STF-CLAM-SD		Edelstahlgitter Käfig Typ II (Deckel/Filter) mit „Frame Clamp“-Verschluss und Trennwand
362-CIIL-STF-NO-ND	OHNE VERSCHL USS	EDELSTAHLGITTER KÄFIG TYP III (ABDECKUNG/FILTER) OHNE VERSCHLUSS OHNE TRENNWAND
362-CIIL-STF-NO-SD		Edelstahlgitter Käfig Typ III (Deckel/Filter) ohne Verschluss mit Trennwand
362-CIII/IIIIH-STF-NO-ND		EDELSTAHLGITTER KÄFIG TYP III/IIIIH (DECKEL/FILTER) OHNE VERSCHLUSS OHNE TRENNWAND
362-CIII/IIIIH-STF-NO-SD		EDELSTAHLGITTER KÄFIG TYP III/IIIIH (ABDECKUNG/FILTER) OHNE VERSCHLUSS MIT TRENNWAND